

LABII®

## E型总磷低量程说明书

品名	量程范围	货号	曲线号	适用仪器
总磷检测盒 (LR)	0-2mg/L	EA03L0	D60-103	具有圆形比色皿槽且可建立标准曲线的分光光度计

### 应用范围:


适用于地表水、市政污水和工业废水等各类水质中总磷的测定。浓度过高时需采用稀释等方法处理。




0570-3088893  
www.titrc.com

浙江迪特西科技有限公司  
浙江省衢州市春城路8号1幢

### 使用方法

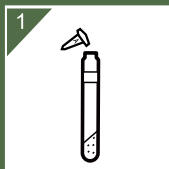


1  
将试剂A粉剂倒入每支试管中

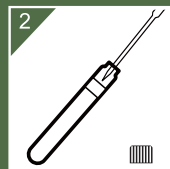


2  
空白溶液: 加入5.0mL纯水  
待测水样: 加入5.0mL水样




3  
125°C, 30min消解

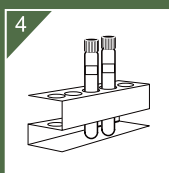


4  
冷却至室温

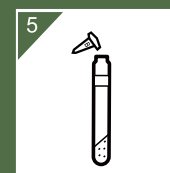

5  
将试剂B粉剂倒入每支试管中, 摇匀使粉剂溶解

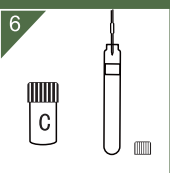

6  
加入1.0mL试剂C, 摇匀,

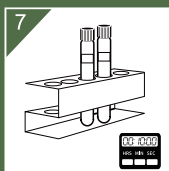

7  
静置10min



8  
测量: 擦拭试管放入参比调零, 放入水样读数